

**TABLE GYNÉCOLOGIQUE ET UROLOGIQUE ÉLECTRIQUE**  
**ELECTRIC GYNECOLOGICAL AND UROLOGICAL TABLE**

*Femina*  
Design • Confort • Adaptabilité



Ergonomie  
Ergonomic

Design  
Design

Adaptabilité  
Adaptability

Confort  
Comfort

Hygiène  
Hygiene

*Femina*  
Design • Confort • Adaptabilité



Commande : une pédale avec sélectionneur électronique fixée sur l'avant du fauteuil et une télécommande manuelle avec fixation à droite ou à gauche du fauteuil.

Control : Hand remote and pedal with electronic selector

- **Table gynécologique à hauteur variable électrique**  
*Gynaecological table with electric height adjustment*
- **Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du fauteuil**  
*Frame comprised of 2 telescopic columns providing the couch high stability*
- **Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris SABLE**  
*Steel quality, epoxy coat, colour sand*
- **Commande : une pédale avec sélectionneur électronique fixée sur l'avant du fauteuil et une télécommande manuelle avec fixation à droite ou à gauche du fauteuil**  
*Control : Hand remote and pedal with electronic selector*
- **Sellerie en forme ergonomique très grand confort, largeur 700, classé non feu M1, 20 coloris au choix. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire, tête adaptée, réglable et amovible pour un très bon maintien de la nuque)**  
*Comfortable shaped upholstery with good density, width 700, M1 class, 20 colours available. Specially developed for optimal patient comfort (very good lumbar support, adaptable head rest that can be adjusted and removed for excellent neck support)*
- **Réglage du dossier par un vérin électrique**  
*Back rest adjustment via 1 electric jack*
- **Inclinaison de l'assise électrique**  
*Inclination of the seat is electric*
- **Proclive/déclive complète de la table (position de Trendelenburg)**  
*Trendelenburg and Anti-Trendelenburg position as standard*
- **Équipé d'une paire d'étriers rabattables, d'un tiroir inox (bac urologie en option), de 2 rails latéraux qui permettent d'accepter de nombreux accessoires et de régler les étriers ou appui-jambes sur la longueur, d'un porte rouleau pour drap d'examen dans le dossier**  
*Equipped with stirrups, stainless steel drawer, 2 side rails that can be used for several accessories and adjust the stirrups or legrests lengthwise, exam sheet roller*
- **Fonctionnalité : Fauteuil équipé de 2 roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds**  
*Operation: Two-roller system on one side for quick and easy-to-use manipulation (as standard)*
- **Capacité de charge : 200 Kg en dynamique**  
*Load capacity: Dynamic 200kg*
- **Dimensions : L.1840 x l. 700 x H. de 48 à 88 cm**  
**Longueur dossier = 900 / Longueur assise = 480 / Longueur jambière = 430**  
*Dimensions: Length 1840 x Width 700 x Height from 480 to 880*  
*Back rest length= 900 / Seat length= 700 / Leg-cushion length= 430*
- **En option : paire d'appui jambes ajustables montés sur rotules ACCFEMINA964, jambière amovible avec rangement sur l'arrière du dossier, très facile et très pratique dans son utilisation ACCFEMINA05, support colposcope ACCFEMINA01, lampe lumière froide avec bras flexible de 1 m. et son étau de fixation ACCFEMINALEDN, bac uro plastique ACCFEMINABAC01, roulettes escamotables ACC24, batterie, 4 roulettes Ø 125 directionnelles freinage centralisé**  
*Options: Adjustable leg rests fitted on kneecap ACCFEMINA964, Removable leg rest with storage behind the back rest, very easy and practical to use ACCFEMINA05, colposcope holder ACCFEMINA01, Table top lamp with 1m flexible arm and fastening clamp ACCFEMINALEDN, plastic removable bowl ACCFEMINABAC01, removable rollers ACC24, accumulator, 4 directional wheels with brake Ø 125*

Coloris  
Colours



Produits distribués par  
Products distributed by

vous présente

# fémina

en

6

points...

- 1 **Tête adaptée, réglable et amovible pour un très bon maintien de la nuque**

*Adaptable head rest that can be adjusted and removed for excellent neck support*

- 2 **Sellerie en forme ergonomique très grand confort, largeur 700, classé non feu M1, 7 coloris au choix. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire)**

*Comfortable shaped upholstery with good density, width 700, M1 class, 7 colours available. Specially developed for optimal patient comfort (very good lumbar support)*

- 3 **Inclinaison de l'assise électrique (15°)**

*Inclination of the seat is electric (15°)*

- **Jambière amovible avec rangement sur l'arrière du dossier ACCFEMINA05**


*Removable leg rest with storage behind the back rest ACCFEMINA05*

- **Position Déclive (15°) - Procline (10°) Position horizontale programmée, l'inclinaison s'arrête automatiquement lorsque la position est atteinte**

*Trendelenburg (15°) and Anti-Trendelenburg position (10°)  
Horizontal position programmed, inclination stops automatically when the position is reached*

- **Position horizontale idéale pour les examens tels que mammographie, échographie ...**

*Ideal horizontal position for exams such as mammographies, ultrasounds ...*

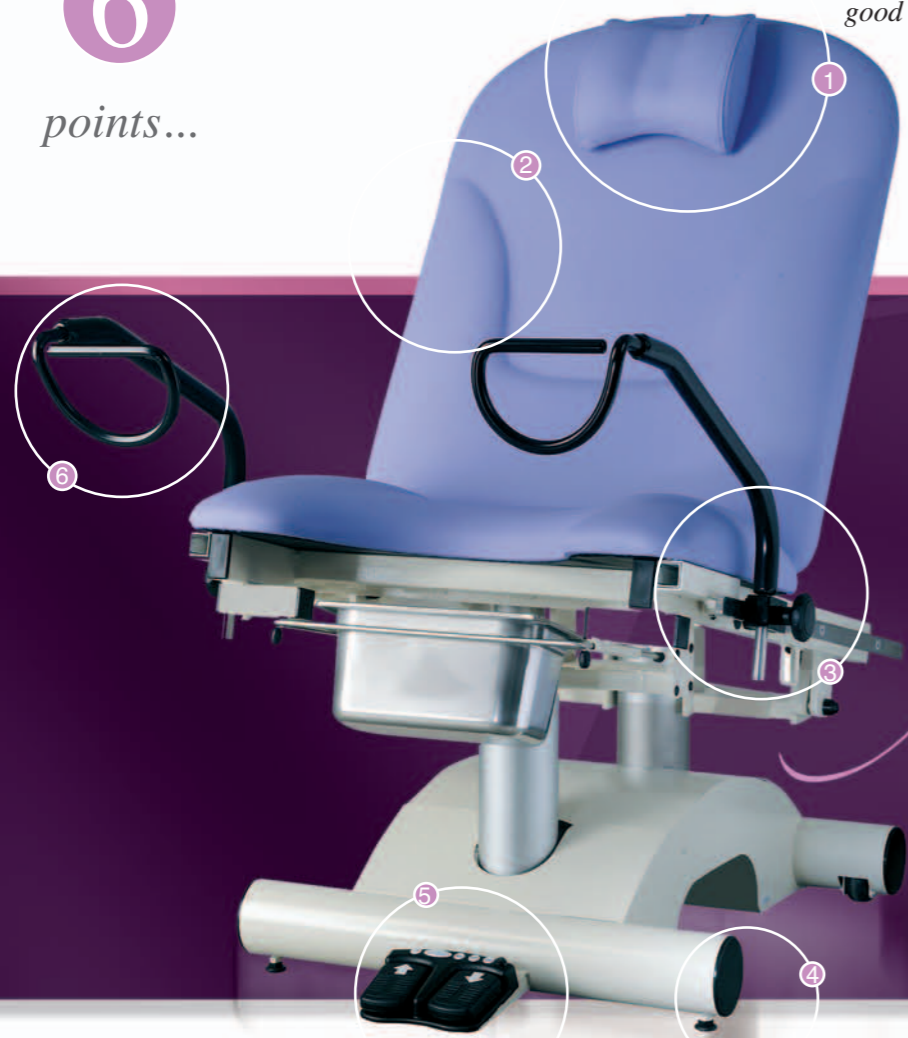

# fémina

Design • Confort • Adaptabilité



- 6 **Paire d'étriers réglables en profondeur et en rotation sur rail inox permettant l'adaptabilité à tous types de morphologies. Sa forme permet également de remplir le rôle d'appui-bras**

*Pair of depth and swing adjustable stirrups on stainless steel rail providing comfort to all morphological types.*

*The shape of the stirrups can also act as arm supports*

- 5 **Commande : une pédale avec sélecteur électronique fixée sur l'avant du fauteuil et une télécommande manuelle avec fixation à droite ou à gauche du fauteuil**

*Control : A pedal with electronic selector secured to the front of the chair and a manual remote with fastening on the right or left*

- 4 **Fonctionnalité : Fauteuil équipé de 2 roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds**

*Operation : Two-roller system on one side for quick and easy-to-use manipulation (as standard)*

- **Paire d'appui jambes ajustables montés sur rotules ACCFEMINA964**

*Adjustable leg rests fitted on kneecap ACCFEMINA964*

- **Lampe lumière froide avec bras flexible de 1 m. et son étai de fixation ACCFEMINALEDN**

*Table top lamp with 1m flexible arm and fastening clamp ACCFEMINALEDN*

- **Position entrée et sortie du fauteuil (inclinaison 10°) sur l'avant.**

*Entry and exit chair positions (inclination 10°)*




- **Roulettes escamotables ACC24**
- Retractable roller system ACC24*



- **Roulettes Ø 125 directionnelles**

*Directional wheels with break Ø 125*

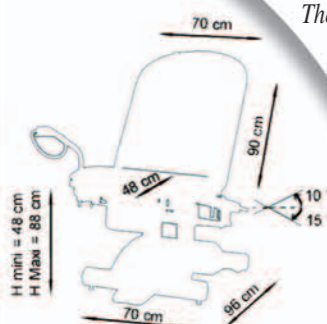

Design  
Design

Ergonomie  
Ergonomic

Hygiène  
Hygiene

Adaptabilité  
Adaptability

Confort  
Comfort

