



Divan d'examen électrique

Gamme 777

777 77

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande : Cadre périphérique
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 30kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 7cm
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté pied
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes escamotables diam. 75mm

DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

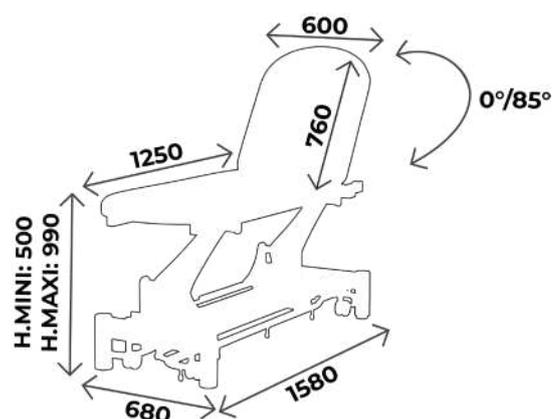

À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 76C
Etau unitaire
pour tige porte-sérum diam. 16mm



ACC 32012
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau



ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



KINEGYNECO
Paire d'étaux et paire d'étriers
chromés



ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle



ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1



ACC TETERGO
Têtière ergonomique amovible




ACC 832
Trou visage avec bouchon

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

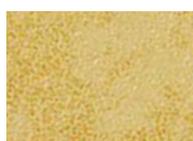


Arno



Garonne



Potomac

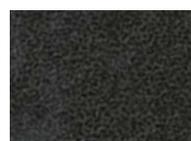


Amour



Mississippi



St Laurent

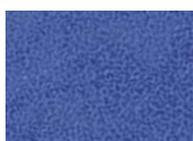

Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre



Origan



Géranium

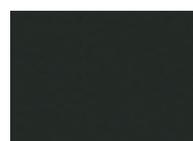

Réglisse




Prune



Perle



Ficelle

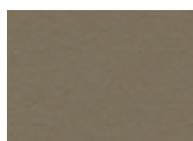


Terre



Béton



Chataigne

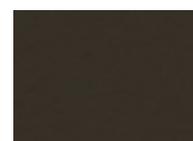

Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 777 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris **sans plus value**


Piètement Peinture EPOXY




RAL 9003

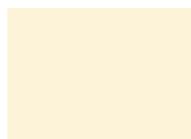

RAL 1013

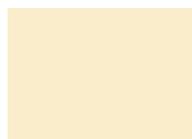

RAL 1015

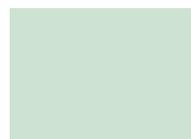

RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017




RAL 5002




RAL 5000

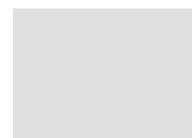

RAL 7035

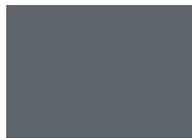

RAL 7016

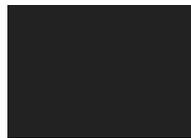

RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com