



*Fauteuil de podologie hydraulique*  
**Gamme LUVIA**  
**LUVIA05T-PODO**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de podologie à hauteur variable hydraulique pivotant à 360° (possibilité de bloquer la rotation), 3 parties
- Dossier et jambière réglables par 3 vérins à gaz indépendants
- Réglage des repose-pieds en longueur très simple à l'aide de boutons indexables
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 35kg/cm<sup>2</sup>, non-feu classée M1, épaisseur 7cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient
- Equipé d'accoudoirs escamotables
- Protection plastique sur assise
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

## DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 57cm à 76cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

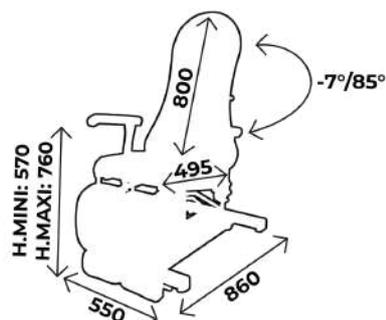

### À NOTER

Le LUVIA05T-PODO peut être mis en **position allongée**



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



**ACC514-LUVI-DOS**  
Protection plastique pour dossier



**ACC TETERGO-LUV**  
Tête ergonomique amovible  
pour gamme LUVIA



**ACC 993**  
Support roulettes escamotables  
diam. 50mm



**ACC 9505**  
Jeu de 4 roulettes diam. 50mm  
avec frein

## ZQOM JAMBIÈRES



# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*




Arno



Garonne



Potomac

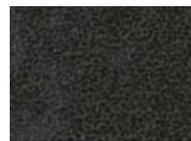


Amour



Mississippi



St Laurent

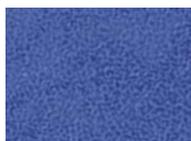

Rhône



Missouri



Seine




Amazone

## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*



Abysse

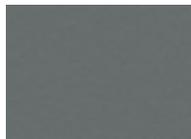


Cendre




Origan




Géranium

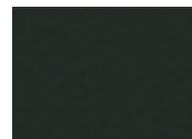

Réglisse

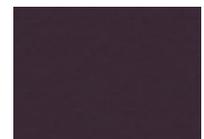


Prune

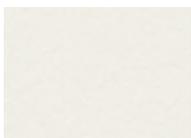

Perle




Ficelle

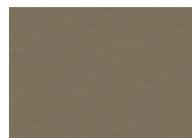


Terre



Béton

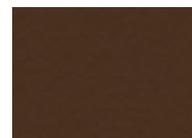

Chataigne

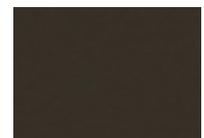

Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate

# COLORIS PIÈTEMENT

Le fauteuil LUVIA05T-PODO est proposé en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016

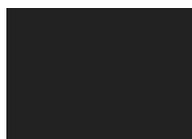

RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)