



Fauteuil hémodialyse électrique
Gamme MULTIKA version V2
MULT-V2-607-01

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil hémodialyse à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Dossier et jambièrre réglables par vérins électriques
- Avec repose pieds réglable par vérin à gaz
- Position de Trendelenburg
- Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
- Equipé d'une paire de repose bras sur rotule, synchronisée avec le dossier
- Tête ergonomique fournie en standard
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Sur 4 roulettes diam. 150mm avec freinage centralisé

DIMENSIONS

- Largeur 60cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

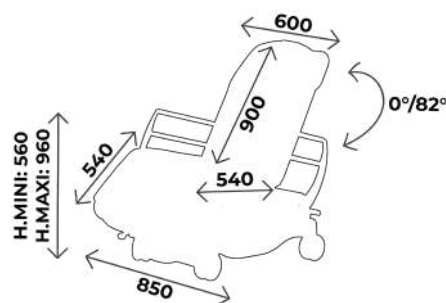

Vous aimerez aussi :

Réf. **MULT-V2-605-01** : Idem MULT-V2-607-01 mais largeur 70cm et roulettes diam. 125mm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ZOOM MULT-V2-607-01 avec accessoires



ACCESSOIRES



ACC CAPOT
Peinture capot
Autre que le gris standard (7035)
16 coloris disponibles



RL-125
4 roulettes diam. 125mm
Avec freins



ACC MULTIK12
Gouttière MULTIKA équipée d'un
clameau pour fixation sur rail 25x10,
l'unité



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étau, l'unité



ACC FEMINA02
Paire d'étriers
sans clameau de fixation



ACC FEMINA964
Paire de repose jambes
sur rotule mousse polyuréthane
sans clameau de fixation



ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)



ACC MULTIK02
Bouton position urgence



ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en
aluminium pour fixation
sur rail 25x10, l'unité
diam. 16mm, diam. 14mm



ACC OVALIA03
Pédale multifonction



ACC MULTIK13
Support télécommande flexible
Longueur 65cm à fixer sur
châssis avec étau



ACC MULTIK03
Tige porte-sérum
2 crochets plastiques équipé
d'un clameau de fixation
sur rail inox 25x10



ACC MULTIK05
Tablette de lecture
sans clameau de fixation



ACC-MULTIKALEDN
Lampe de lecture à LED
avec clameau de fixation

ACC 514-MULTIKA2
Protection plastique transparent
largeur 60cm, pour jambière

DEBRAYAGE
Débrayage manuel du dossier

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
sans plus value

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban




COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme MULTIKA a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**


Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

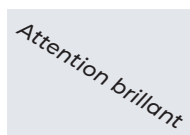

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com