



Fixed height sampling chair

LUVIA range

LUVIA78T

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

TECHNICAL DETAILS

- 3 sections sampling chair with fixed height 51cm
- Backrest and legrest adjustment with a synchronised gas jack
- The legrest can be put in a vertical position
- Trendelenburg position
- Ergonomic upholstery with good density 35kg/cm², M1 fire retardant class, thickness 7cm. Specially developed for optimal patient comfort
- Equipped with 2 blood test splints, adjustable in every positions with serrated blocks system
- Plastic protection on seat and legrest as standard
- Chromed base

DIMENSIONS

- Width 55cm
- Height 51cm
- Load capacity : 130kg

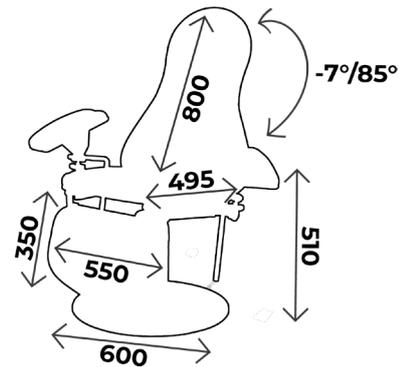

OTHER ELEMENTS

All our chairs can be put in **lying position**

You may also like :

Ref. **LUVIA78TSJ** : Same as LUVIA78T but without legrest



WHAT YOU NEED TO KNOW

- ✓ Delivery time: 15 days upon receipt of order
- ✓ Warranty : 2 years (1 year for the upholstery)

ACCESSORIES




ACC 537LUVIA

Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour gamme LUVIA



ACC 535

Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum

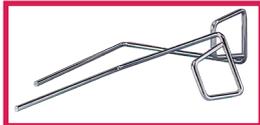

ACC 105

Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-GOUT

Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC514-LUVI-ASS

Protection plastique assise



ACC514-LUVI-JAM

Plastic protection for legrest



ACC514-LUVI-DOS

Protection plastique pour dossier



ACC 54005

Tête 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340 avec étau



ACC 910-PLAT04

Plateau plastique support 350x270 avec étau



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil



ACC 113U-105

Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau



ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC TETERGO-LUV

Tête ergonomique amovible pour gamme LUVIA



ACC 110

Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étau, l'unité



ACC 110POLY

Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité



ACC 125

Porte rouleau adaptable tous modèles

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1


Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban



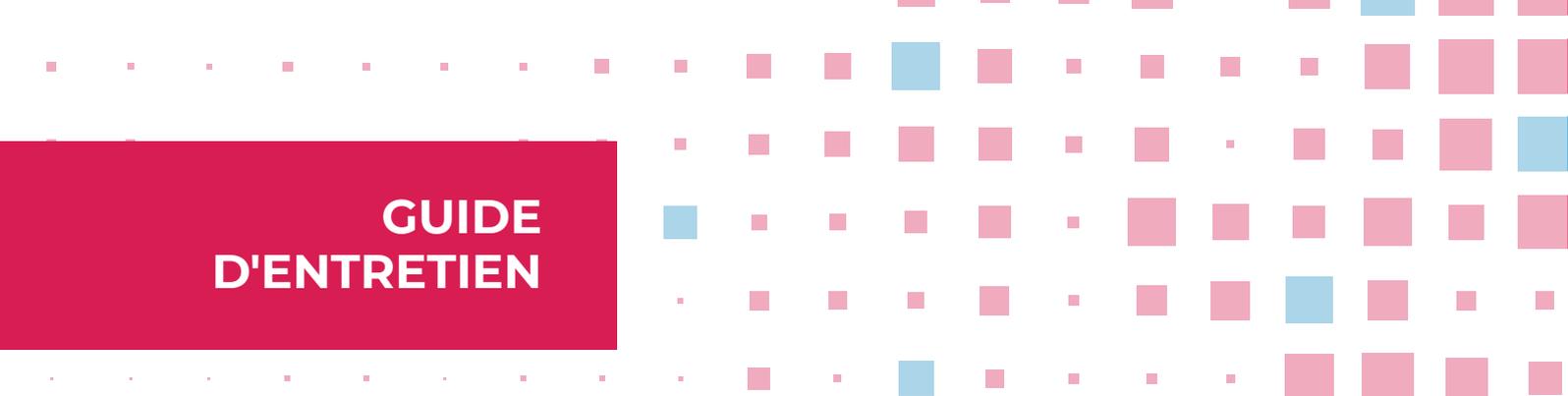


GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an

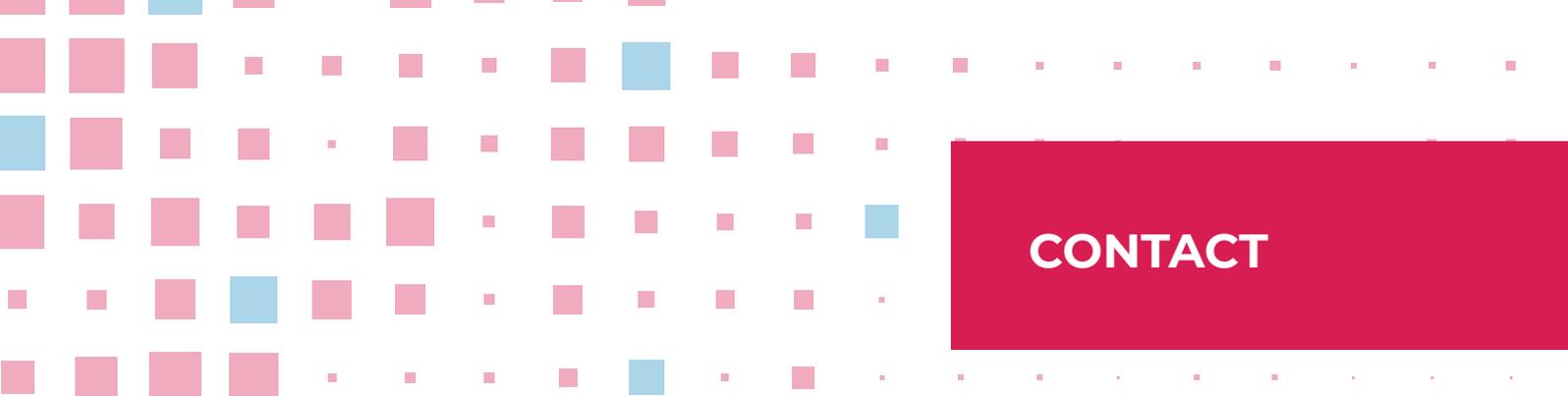

CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com