



Fauteuil ambulatoire électrique
Gamme MULTIKA version V2
MULT-V2-700

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ambulatoire à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Dossier et jambièrre réglables par vérins électriques
- Position de Trendelenburg
- Matelas monobloc, épaisseur 9cm (6cm de mousse HR35 + 3cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme)
- Equipé de 2 rails latéraux en inox 2,5x1cm pour fixation accessoires, d'une barre de poussée et d'un porte-rouleau pour drap d'examen dans le dossier
- Tête ergonomique fournie en standard
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Système de freinage centralisé deux pédales à l'avant et une barre de freinage à l'arrière
- Sur 4 roulettes diam. 150mm

DIMENSIONS

- Largeur 70cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

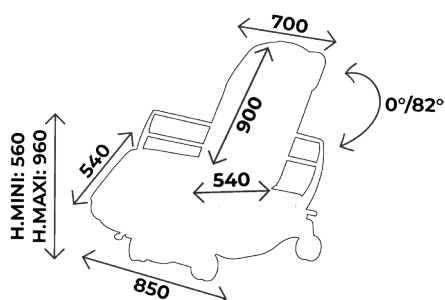

Vous aimerez aussi :

Réf. **MULT-V2-700-01** : Idem MULT-V2-700 mais avec repose pieds

Réf. **MULT-V2-600** : Idem MULT-V2-700 mais largeur 60cm


Réf. **MULT-V2-600-01** : Idem MULT-V2-700 mais largeur 60cm avec repose pieds



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

ZOOM MULT-V2-700 avec accessoires

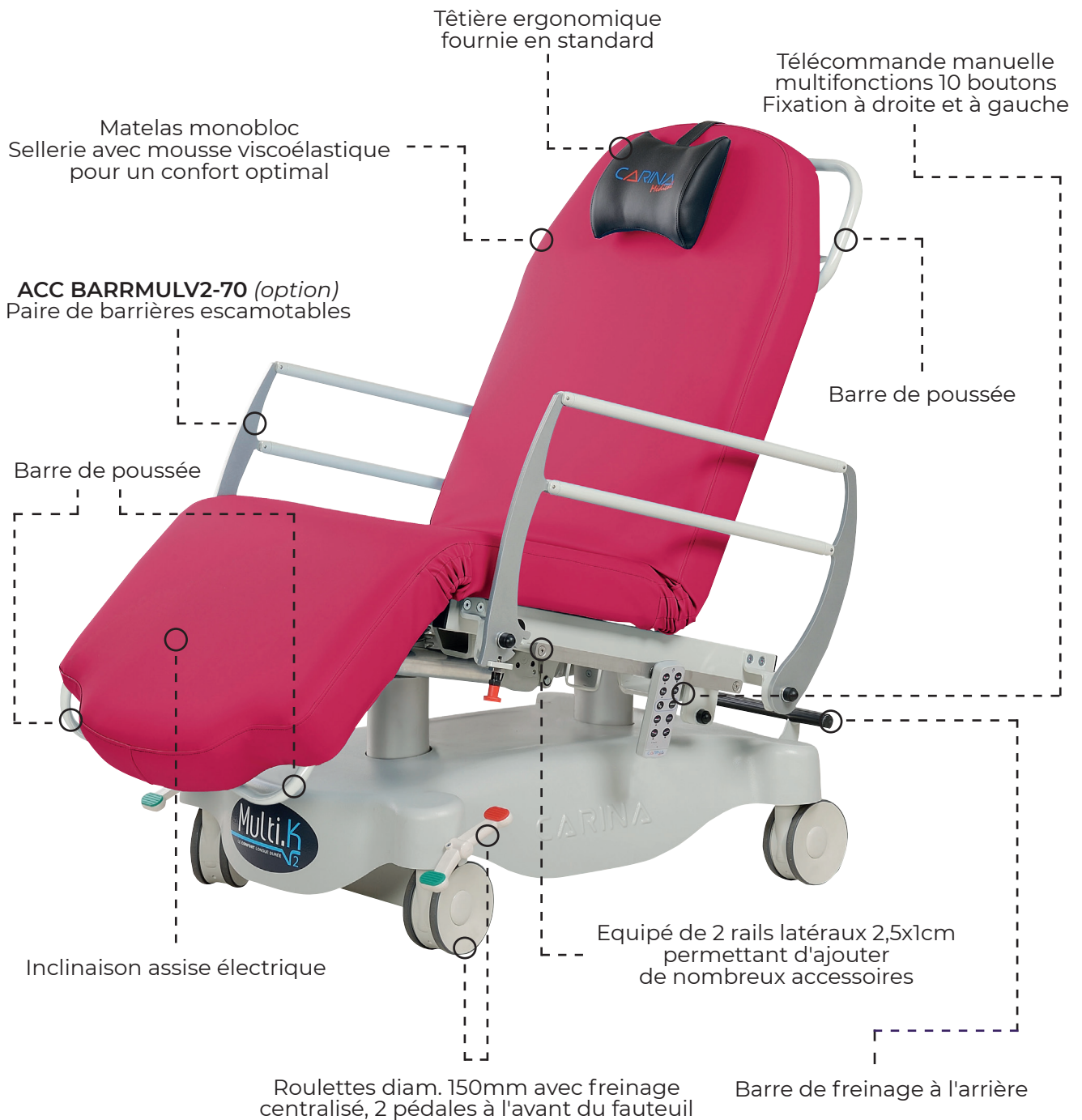

ACCESSOIRES



ACC CAPOT
Peinture capot
Autre que le gris standard (7035)
16 coloris disponibles



RL-150
4 roulettes diam. 150mm
Freinage centralisé



ACC MULTIK12
Gouttière MULTIKA équipée d'un
clameau pour fixation sur rail 25x10,
l'unité



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
Sans étai, l'unité



ACC FEMINA02
Paire d'étriers
sans clameau de fixation




ACC FEMINA964
Paire de repose jambes
sur rotule mousse polyuréthane
sans clameau de fixation



ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)



ACC MULTIK02
Bouton position urgence

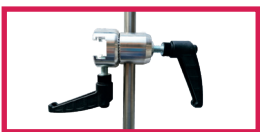

ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en
aluminium pour fixation
sur rail 25x10, l'unité
diam. 16mm, diam. 14mm



ACC BARRMULV2-70
Paire de barrières de lit
escamotables largeur 70cm



ACC 32012+
ACC MULTIKA76-70
Tige porte-sérum
2 crochets plastiques et étai
*(Attention : option uniquement
valable si barrières Réf: ACC BARRMULV2-70)*



ACC OVALIA03
Pédale multifonction



ACC MULTIK13
Support télécommande flexible
Longueur 65cm à fixer sur
châssis avec étai



ACC MULTIK03
Tige porte-sérum
2 crochets plastiques équipé
d'un clameau de fixation
sur rail inox 25x10



ACC MULTIK05
Tablette de lecture
sans clameau de fixation



ACC-MULTIKALEDN
Lampe de lecture à LED
avec clameau de fixation

DEBRAYAGE

Débrayage manuel du dossier

ACC 514-MULTIKA3

Protection plastique transparent
largeur 70cm, pour jambe

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
sans plus value

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban




COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme MULTIKA a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**


Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com