



*Photo avec Sellerie Type SERENITY*

*Fauteuil ORL*  
**Gamme OREA**  
**OREA-HVH1-SERENITY**

**CARINA**  
*Médical*




## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ORL à hauteur variable hydraulique, 3 parties, sur socle chromé
- Equipé d'une tête réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL
- Equipé de 2 accoudoirs escamotables
- Dossier réglable par vérin à gaz synchronisé avec la jambière et le repose-pieds
- Position de Trendelenburg
- Sellerie SERENITY - certifiée non-feu, classement M1
- Piétement mécano-soudé en acier peint époxy, coloris gris clair (Ral 7035) en standard

## DIMENSIONS

- Largeur 55 cm en standard ou largeur 65 cm en option
- Hauteur variable à partir de 48 à 88cm
- Capacité de charge en dynamique :  
150 Kg avec dossier à gaz  
200 Kg avec option dossier et jambière électrique

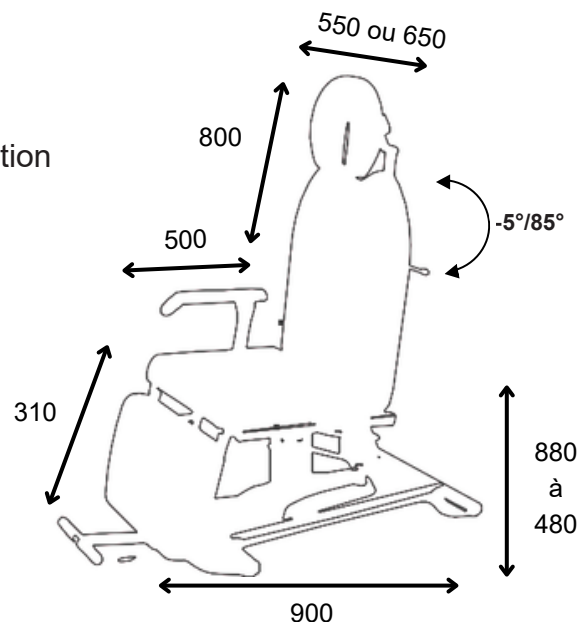

Tête réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL



### Vous aimerez aussi :

Réf. **OREA-HF** : Hauteur Fixe

Réf. **OREA-HVE** : Hauteur Electrique



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

# ACCESSOIRES



**SELLERIE  
SERENITY**  
Plate



**SELLERIE  
CONFORT**  
Bourrelets



**SELLERIE  
PREMIUM**  
Viscoélastique

## **ACC 514-JAMBIERE**

Protection plastique  
de la jambière pour  
fauteuil largeur 55 cm

## **ACC 514-ASSISE**

Protection plastique  
de l'assise pour fauteuil  
largeur 55 cm

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

## Revêtement : Sellerie Gamme Classique



## Revêtement : Sellerie Gamme Urban



## Revêtement : Sellerie Gamme GINKGO






## COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme est proposée en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

### *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

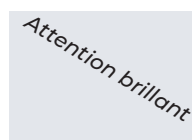

ARGENT

# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvaniol pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS - FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49

Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)